


# 分光光度模块操作指南

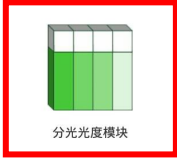

选择分光光度模块

分光光度检测

多功能检测

系统设置

选择多功能检测

检测任务管理

任务设置

开始检测

选择任务设置

任务列表

| <input type="checkbox"/> | 样品编号              | 样品名 | 受检单位  | 抽样时间                |
|--------------------------|-------------------|-----|-------|---------------------|
| <input type="radio"/>    | 20250411094058-15 | 白菜  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:58 |
| <input type="radio"/>    | 20250411094042-37 | 苹果  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:42 |

开始检测

添加

删除

点击“添加”

添加任务

样本编号

20250411101522-48

检测单位

请选择

受检单位

请选择

样品主类

请选择

样品子类

请选择

样品名称

请输入

抽样日期

2025-04-11 10:15:22

提交

取消

依次填入检测单位-受检单位-样品主类-样品子类-样品名称

点击“提交”

| 任务列表                  |                   |     |       |                     |
|-----------------------|-------------------|-----|-------|---------------------|
| <input type="radio"/> | 样品编号              | 样品名 | 受检单位  | 抽样时间                |
| <input type="radio"/> | 20250411094058-15 | 白菜  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:58 |
| <input type="radio"/> | 20250411094042-37 | 苹果  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:42 |

任务添加完成后点击“开始检测”

开始检测

添加

删除

检测项目: 有机磷和氨基甲酸酯类

| 通道号 | 样品编号 | 样品名称 | 抑制率 | 检测结果 | 受检单位 | 检测单位 |
|-----|------|------|-----|------|------|------|
| A1  |      |      |     |      |      |      |
| A2  |      |      |     |      |      |      |
| A3  |      |      |     |      |      |      |
| A4  |      |      |     |      |      |      |
| A5  |      |      |     |      |      |      |
| B1  |      |      |     |      |      |      |
| B2  |      |      |     |      |      |      |
| B3  |      |      |     |      |      |      |
| B4  |      |      |     |      |      |      |
| B5  |      |      |     |      |      |      |

对照值: 

对照

检测

打印

返回

进入检测界面先选择检测项目，再点击 A1 通道选择任务，把对照液放入 A1 通道再点击对照。

检测项目: 亚硝酸盐 检测成功

| 通道号 | 样品编号              | 样品名称 | 检测值  | 检测结果 | 受检单位  | 检测单位       |
|-----|-------------------|------|------|------|-------|------------|
| A1  | 20250411094042-37 | 苹果   | 0ppm | 合格   | 第一幼儿园 | 市南区市场监督管理局 |
| A2  | 20250411094058-15 | 白菜   | 0ppm | 合格   | 第一幼儿园 | 市南区市场监督管理局 |
| A3  |                   |      |      |      |       |            |
| A4  |                   |      |      |      |       |            |
| A5  |                   |      |      |      |       |            |
| B1  |                   |      |      |      |       |            |
| B2  |                   |      |      |      |       |            |
| B3  |                   |      |      |      |       |            |
| B4  |                   |      |      |      |       |            |

对照

检测

打印

返回

对照成功后，依次点击 A1、A2 通道选择任务填入，把对应的检测液依次放入通道，再点击“检测”。

# 胶体金模块操作指南



选择胶体金模块



选择定性检测



选择任务设置



点击“添加”

添加任务

样本编号: 20250411101522-48

检测单位: 请选择      受检单位: 请选择

样品主类: 请选择      样品子类: 请选择

样品名称: 请输入

抽样日期: 2025-04-11 10:15:22

提交      取消

依次填入检测单位-受检单位-样品主类-样品子类-样品名称

点击“提交”

任务列表

| <input type="radio"/> | 样品编号              | 样品名 | 受检单位  | 抽样时间                |
|-----------------------|-------------------|-----|-------|---------------------|
| <input type="radio"/> | 20250411094058-15 | 白菜  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:58 |
| <input type="radio"/> | 20250411094042-37 | 苹果  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:42 |

开始检测      添加      删除

任务添加完成后点击“开始检测”

样品检测

检测单位: 123

检验员: 123

样品类型: 农产品类

受检单位: 第一幼儿园

样品名称: 苹果

检测项目: 请选择

检测时间: 2025-04-11 09:40:42

检测限: 2-37

临界值: 8-15

T/C值: 2025-04-11 09:40:58

检测结果:

| 样品编号              | 样品名 | 受检单位  | 抽样时间                |
|-------------------|-----|-------|---------------------|
| 20250411094042-37 | 苹果  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:42 |
| 20250411094058-15 | 白菜  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:58 |

即时检测      打印数据      进出卡      返回

选择检测任务

样品检测

检测单位: 市南区市场监督管理局

检验员: 123

样品类型: 农产品类

受检单位: 第一幼儿园

样品名称: 苹果

检测项目: 请选择

检测时间: 2025-04-11 09:40:42

检测限:

临界值:

T/C值:

检测结果:


即时检测      打印数据      进出卡      返回

选择检测项目，把检测卡插入进样槽的卡托上，再点击“即时检测”。如需继续进行下一个任务可点击“样品名称”处调出检测任务单。

# ATP 模块操作指南



选择 ATP 模块

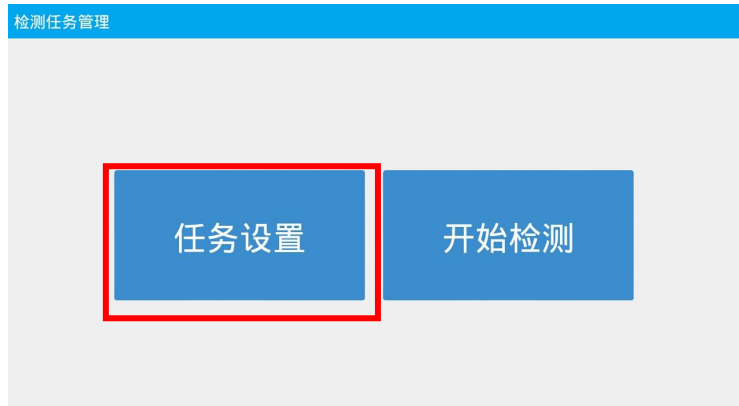

选择任务设置



点击“添加”



依次填入检测单位-受检单位-样品主类-样品子类-样品名称-检测限，再点击“提交”

| 任务列表                  |                   |     |       |                     |
|-----------------------|-------------------|-----|-------|---------------------|
| <input type="radio"/> | 样品编号              | 样品名 | 受检单位  | 抽样时间                |
| <input type="radio"/> | 20250411094058-15 | 白菜  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:58 |
| <input type="radio"/> | 20250411094042-37 | 苹果  | 第一幼儿园 | 2025-04-11 09:40:42 |

开始检测

添加

删除

任务添加完成后点击“开始检测”

| ATP样品检测                   |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 检测单位: 市南区市场监督管理局          | <div>检测</div> <div>打印数据</div> <div>返回</div> |
| 检验员: 123                  |                                             |
| 样品类型: 餐饮器具类               |                                             |
| 受检单位: 第一幼儿园               |                                             |
| 样品名称: 盘子                  |                                             |
| 检测时间: 2025-04-11 09:52:00 |                                             |
| 检测限: 50                   |                                             |
| 检测值:                      |                                             |
| 检测结果:                     |                                             |

选择检测任务后点击“开始检测”，如需继续进行下一个任务可点击“样品名称”处调出检测任务单。